

নতুন ISP Program তৈরির নির্দেশাবলী

ISP Program দ্বারা কোন ইন্ডিভিজুয়ালের IEP এর রেকর্ড রাখা যায়। ISP Program হল ইন্ডিভিজুয়ালকে কোন নির্দিষ্ট কাজে দক্ষ করার উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত প্রোগ্রাম।

আপনার 'ISP Submit' রোল থাকলে আপনি নতুন ISP Program তৈরি করতে পারবেন।

১. ISP Program তৈরি করার জন্য আপনার ড্যাশবোর্ডের Individual ট্যাবে ISP Program এর পাশের **New** লিঙ্কে ক্লিক করুন।

To Do	Care
Individual	T-Log New Search Archive
Health	ISP Data New Search Report Search Report Archive
Agency	ISP Program New Search Archive Acknowledgement Report
Admin	ISP Program Template Library Published Search
Agency Reports	Individual Data Search
Settings	

২. Select Program for ISP Program পেজ থেকে সঠিক প্রোগ্রামটি বেছে নিন।

Select Program For ISP Program				
<div> All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z </div> <div>Filter</div> <div>Showing 1 to 2 of 2 entries</div>				
Program Name	Site Name	Program Type	Cost Center Number	
Day Shift	DEMO Site	Autism Services-Skills Training		
Morning Shift	DEMO Site	Autism Services-Skills Training		

৩. Individual List for ISP Program পেজ থেকে সঠিক ইন্ডিভিজুয়াল কে বেছে নিন।

Individual List for ISP Program		
Program: Day Shift (DEMO Site)		
<div> All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z </div> <div>Filter</div> <div>Showing 1 to 9 of 9 entries</div>		
Last Name	First Name	Individual ID
Afreen	Anita	
Begum	Mariam	
Chowdhury	Amit	
Hossain	Sonia	
Ibrahim	Niloy	1234
Khan	Arnob	
Mojumdar	Niloy	
Niloy	Ibrahim	
Rahmen	Anita	
<div>Previous 1 Next</div>		

নতুন ISP Program তৈরির নির্দেশাবলী

৪. নতুন ISP Program ফর্মে Program Name, Program Creation Date, Maximum Number of Times a Day ইত্যাদি আবশ্যিকীয় ঘরগুলো পূরণ করুন। আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে অন্যান্য ঘরগুলো পূরণ করুন।

ISP Program
 Form ID: ISP-DEMOBBGD-E884NETYSJW9X
 Status: New
 Entered By: Arun Das, Supervisor


Program Description

Provider Program : Day Shift (DEMO Site) Program Name : * <input type="text" value="Gross Motor Skills"/> Program Creation Date : * <input type="text" value="06/01/2016"/>	Individual Name : Amit Chowdhury Time Zone : Asia/Dhaka
Long Term Objective : <input style="width: 95%;" type="text" value="অমিত যাতে পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে"/> About 2865 characters left	Goal/Service : <input style="width: 95%;" type="text" value="অমিত কারো সাহায্য ছাড়া বসবে ও হাঁটবে, প্রয়োজনে দৌড়াবে"/> About 2859 characters left
Reason for Program : <input style="width: 95%;" type="text" value="প্রতিদিনের জীবনযাপনের অপরিহার্য অংশ"/> About 2901 characters left	Schedule and Frequency : <input style="width: 95%;" type="text" value="প্রতি সপ্তাহের রবিবার, মঙ্গলবার ও বুধস্পতিবার"/> About 2877 characters left
Maximum Number of Times a Day : * <input type="text" value="5"/>	Frequency of Documentation : <input style="width: 95%;" type="text" value="সপ্তাহে তিনবার - রবিবার, মঙ্গলবার ও বুধস্পতিবার"/> About 2875 characters left
Location : <input type="text" value="School"/>	Target Completion Date : <input type="text" value="12/01/2016"/>
Criteria for Completion : <input style="width: 95%;" type="text" value="৬ মাসে কমপক্ষে হাঁটতে ও বসতে পারা"/> About 2913 characters left	Materials Required : <input style="width: 95%;" type="text" value="ক্লাশ কার্ড, পুরস্কার (পছন্দের খাবার/খেলনা) ইত্যাদি"/> About 2859 characters left


বি.দ্র.: Maximum Number of Times a Day সাধারণত প্রয়োজনের চেয়ে সংখ্যাটি ২-৩ বার বেশি লেখার উপদেশ দেওয়া হয়। কারণ, ISP Program **Approve** করার পর এই ঘরটি আর পরিবর্তন করতে পারবেন না।

নতুন ISP Program তৈরির নির্দেশাবলী


৫. আপনার পছন্দের Scoring Method বেছে নেওয়ার জন্য ফর্মের নিচে **Select Scoring Method** বাটন ক্লিক করুন।

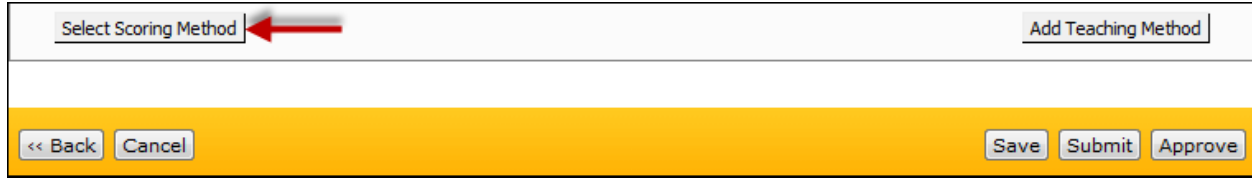


৬. ISP Program Scoring Method পেজের লিস্ট থেকে আপনার পছন্দের Scoring Method বেছে নিন। এরপর **Continue** বাটন ক্লিক করুন।

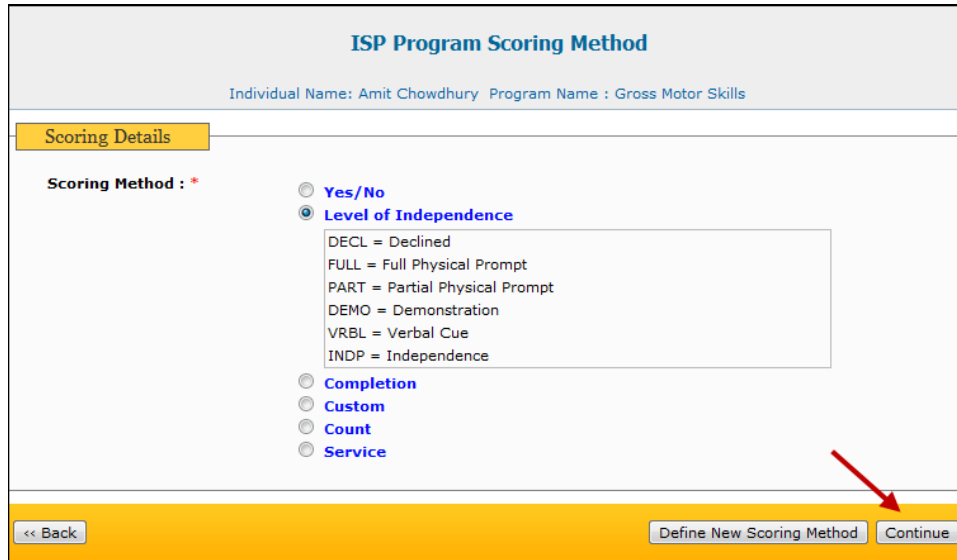

৭. লিস্টের বাইরে নতুন কোন Scoring Method তৈরি করতে চাইলে পেজের নিচের **Define New Scoring Method** বাটন ক্লিক করুন।

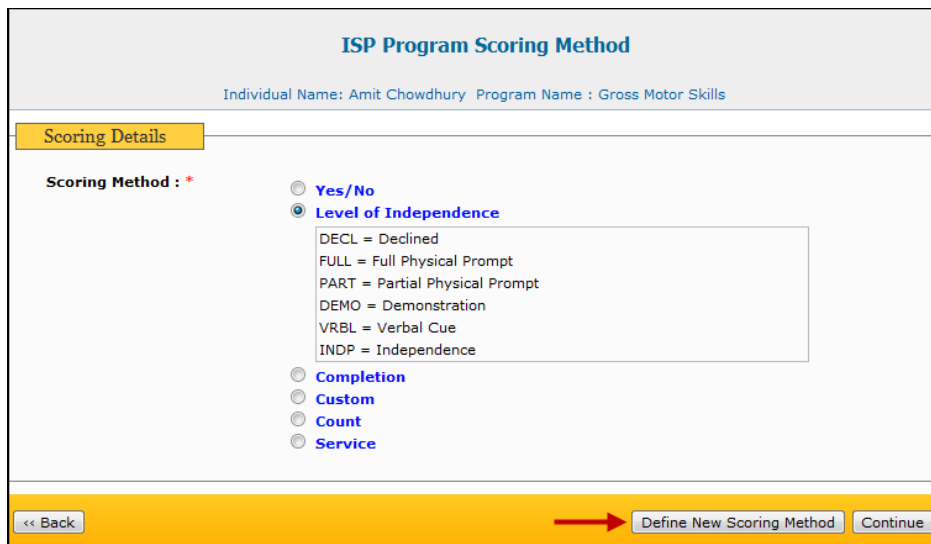

৮. তাহলে নতুন Scoring Method তৈরি করার জন্য একটি ISP Program Scoring Method পেজ দেখতে পাবেন।

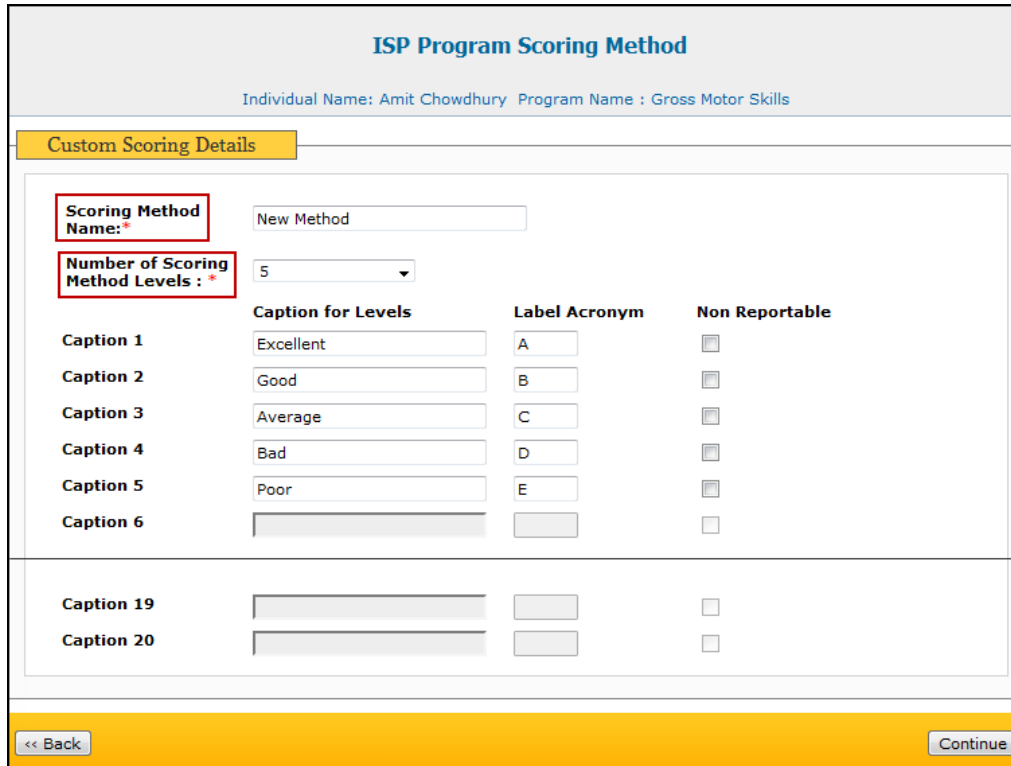

ISP Program Scoring Method

Individual Name: Amit Chowdhury Program Name : Gross Motor Skills

Custom Scoring Details


Scoring Method Name: * New Method

Number of Scoring Method Levels : * 5

Caption for Levels	Label Acronym	Non Reportable	
Caption 1	Excellent	A	<input type="checkbox"/>
Caption 2	Good	B	<input type="checkbox"/>
Caption 3	Average	C	<input type="checkbox"/>
Caption 4	Bad	D	<input type="checkbox"/>
Caption 5	Poor	E	<input type="checkbox"/>
Caption 6			<input type="checkbox"/>
Caption 19			<input type="checkbox"/>
Caption 20			<input type="checkbox"/>

<< Back Continue

৯. Scoring Method বাছাই করার পর **Continue** বাটন ক্লিক করুন। আপনার বাছাই করা Scoring Method টি ISP Program ফর্মের Scoring Details অংশে দেখতে পাবেন।

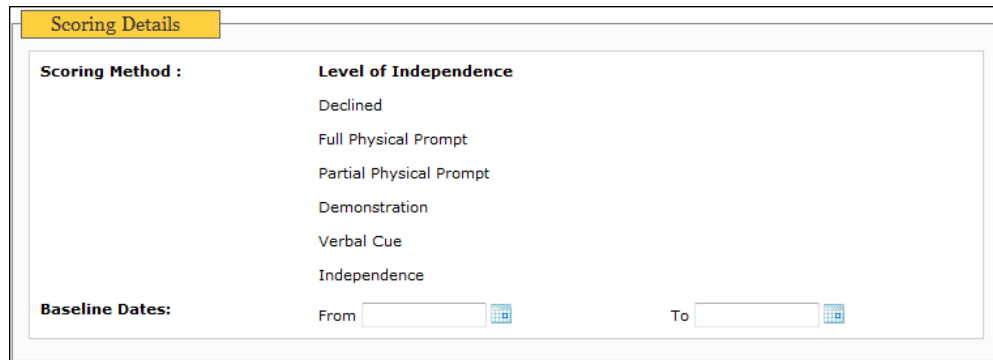

Scoring Details

Scoring Method : Level of Independence

- Declined
- Full Physical Prompt
- Partial Physical Prompt
- Demonstration
- Verbal Cue
- Independence

Baseline Dates: From To

১০. Scoring Method বাছাই করার পর আপনাকে Task তৈরি করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য Task বাছাই করে দিতে ফর্মের নিচে **Add Task** বাটন ক্লিক করুন।



Change Scoring Method Add Task Add Teaching Method

<< Back Cancel Save Submit Approve

১১. Add New Task পেজে Task Name, Task Description লিখুন। **Save & Add Another** বাটন ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি একাধিক Task এন্টার করতে পারবেন। এন্ড্রি শেষ হলে **Continue** বাটন ক্লিক করুন।

Add New Task

Individual Name: Amit Chowdhury Program Name : Gross Motor Skills

Scoring Details

Scoring Method :
☐ Declined
☐ Full Physical Prompt
☐ Partial Physical Prompt
☐ Demonstration
☐ Verbal Cue
☐ Independence

Level of Independence
☐ Declined
☐ Full Physical Prompt
☐ Partial Physical Prompt
☐ Demonstration
☐ Verbal Cue
☐ Independence

Task(s)

Add New Task
Task Name :

Task Name ইংরেজিতে লিখতে হবে

Task Description : *

About 2872 characters left

Baseline Score For Declined :
Baseline Score For Full Physical Prompt :
Baseline Score For Partial Physical Prompt :
Baseline Score For Demonstration :
Baseline Score For Verbal Cue :
Baseline Score For Independence :

<< Back
Save & Add Another
Continue


১২. Teaching Method এন্টার করার জন্য ফর্মের নিচে **Add Teaching Method** বাটন ক্লিক করুন।

Change Scoring Method | Add Task | Edit Task(s) | Add Teaching Method


<< Back
Cancel
Save
Submit
Approve

নতুন ISP Program তৈরির নির্দেশাবলী


১৩. Add New Teaching Method পেজে আপনি Teaching Method সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে পারবেন। **Save & Add Another Teaching Method** বাটন ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি একাধিক Teaching Method প্রবেশ করাতে পারবেন। লেখা শেষ হলে **Continue** বাটন ক্লিক করুন।

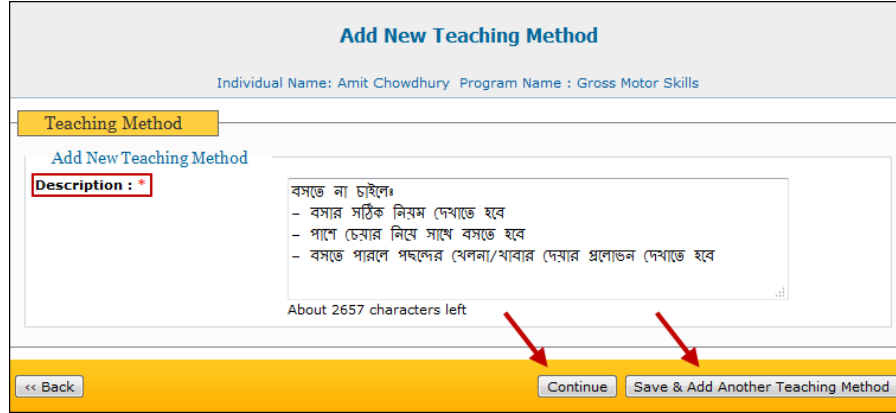

১৪. Other Details অংশটিতে কোন পরিবর্তন করার দরকার নেই।

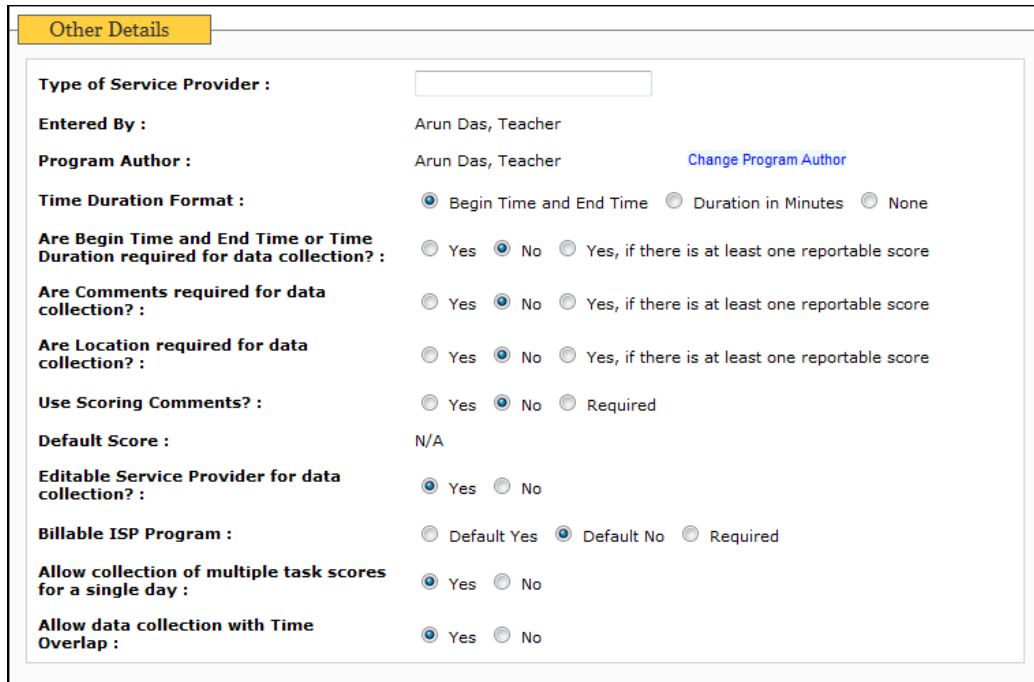

১৫. Files and Images অংশের নিচে **Add** বাটন ক্লিক করে ফাইল এবং ছবি যোগ করতে পারবেন।

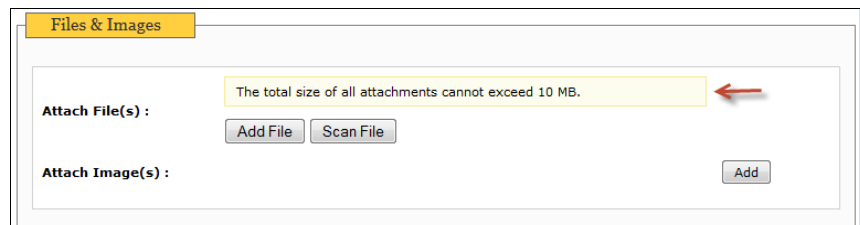

নতুন ISP Program তৈরির নির্দেশাবলী

বি.দ্র.: প্রতিটি ফাইল সর্বোচ্চ ৩ MB হতে পারবে। সর্বমোট ১০ MB এর ফাইল যোগ করতে পারবেন।

Files & Images

The total size of all attachments cannot exceed 10 MB.


File Name	Size	Action
Precautions for Toothbrushing.doc	25.50 KB	Download Remove
Prescription from Physician.doc	21.50 KB	Download Remove

Total uploaded **47.00 KB** and remaining **9.95 MB**.

Add File

Scan File

Attach Image(s) :



Remove

প্রতিটি ফাইল সর্বোচ্চ ৩ MB করে
সবগুলো ফাইলের (ছবিসহ) মোট
সাইজ ১০ MB পর্যন্ত হতে পারবে

Add

ছবি যোগ করতে
এখানে ক্লিক করুন।

১৬. সব ডেটা দেয়া হলে ফর্মের নিচে আপনার রোল অনুযায়ী **Save**, **Submit** অথবা **Approve** বাটনে ক্লিক করুন।

<< Back

Cancel

Save

Submit

Approve

বি.দ্র.: Approved ISP Program এ Scoring Method এডিট বা আপডেট করতে পারবেন না এবং নতুন Task যোগ করতে পারবেন না।